

Dr.Fresco *Fion*

A New Innovative
Ultrasonic Skin Cleaner

取扱説明書



保証書付

要保管

ご使用前には、必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、大切に保管してください。

目次

取扱説明書に関するご注意	P 2
正しく安全にご使用いただくために	P 2・3
使用前のご注意	P 4
使用中・使用後のご注意	P 5
保守・点検のご注意	P 6
各部の名称・仕様・本体セット内容 本体操作方法	P 7
トリートメント方法	P 8
Dr.Fresco専用水	P 9
リチウムイオン電池のリサイクルについて	P 10
保証規定	P 11
保証書	P 12

取扱説明書に関するご注意

- ◆取扱説明書は本機器を安全にお使いいただくために必要です。本機器を人に貸したり、差し上げるときには必ずこの取扱説明書を一緒にお渡しください。
- ◆ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
- ◆あなたや他の人へ危害、財産への損害を未然に防止するために、下記のような絵表示をしています。危害や損害の程度を表していますので、内容を十分にご理解いただいてから本文をお読みください。

正しく安全にご使用いただくために

ご使用前に必ず本紙をお読みになり、正しくご使用ください。

警告サインがついている注意事項は、ご使用前に必ずお読みになり、お守りください。警告サインの表示と意味は、次のようになっています。

	「危険・警告・注意」を促す内容です。 ※表示例は「感電注意」
	実行してはいけない「禁止」の内容です。 ※表示例は「分解禁止」
	行為を指示する「強制」の内容です。 ※表示例は「プラグをコンセントから抜く」

 危険	誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示します。
 警告	誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性または、物的損害が想定される内容を示します。

正しく安全にご使用いただくために

⚠ 危険

以下のような医用電子機器との併用は、誤作動を招く恐れがありますので使用しないでください。

- 1) ペースメーカー等の体内植込型医用電子機器
- 2) 人工心肺等の生命維持用電子機器
- 3) 心電計等の装着型の医用電子機器

⚠ 警告

以下に当てはまる場合は使用をお避けください。

また、本機器は美容を目的としているため、他の目的には絶対に使用しないでください。

- 発熱を伴う疾患・血圧異常時
- 感染性疾患・急性疾患などを患っている方
- アレルギー体質(アトピー性皮膚炎)やケロイド体質の方
- 顔面黒皮症の方、病的なシミ・ホクロ・イボのある部位
- 整形手術を受けた部分や、金属・プラスチック・シリコンを埋め込んでいる部位
- 光過敏症の方
- 妊娠中の方や産後まもない方
- ステロイド系ホルモン剤の使用や化粧品により炎症を起こしている部位
- 血友病患者や出血性疾患を伴う病気の方
- 12歳以下の方
- マヒのある方、意思表示のできない方
- 肌が荒れている時やニキビがひどい時
- 体調が特にすぐれない時
- 飲酒をした時や二日酔いの時
- 粘膜や陰部などの、目的以外の部位へは使用しないでください
- 過去に下記のようなトラブルの経験がある方は医師に相談の上、ご使用ください
 - ・化学繊維でのトラブル(かぶれ等)
 - ・化粧品によるトラブル(かぶれ等)
 - ・美容機器を使用したトリートメントのトラブル

使用前のご注意

⚠ 危険

他の美容機器とは同時に使用しないでください。



⚠ 警告

火災や感電の原因となるため、以下の事項を必ずお守りください。

- ①指定されている部位、目的以外には絶対に使用しないでください。
- ②水分や湿気の多い所では絶対に使用しないでください。
- ③ACアダプター類の上に重いものを絶対に乗せないでください。
- ④ACアダプター類が傷んだら、ご購入店または代理店にお問い合わせください。
- ⑤仕様に記載されている電源・電圧以外で使用しないでください。



⚠ 注意

事故やトラブルの原因となりますので、以下の事項をお守り下さい。

- ①湿度の高い所、ほこりの多い所で使用はしないでください。
本機器の寿命を縮め、故障の原因となります。
- ②長期間使用しなかった場合、再度、使用する前に本体が正常かつ安全に作動することを確認してください。
- ③タコ足配線で充電をしないでください。
- ④本機器に水をかけたり、こぼしたりしないでください。水などが本機器内に入ると故障の原因となります。
- ⑤ACアダプターをコンセントに差し込む時は、必ずプラグを持って確実に差し込んでください。また、抜く時も必ずプラグを持って抜いてください。コードをもって引き抜きますと、断線の恐れがあります。
- ⑥濡れた手でACアダプターの抜き差しをしないでください。感電の原因となります。
- ⑦専用のACアダプター以外を使用しないでください。
- ⑧本機器をご使用の際は、メガネやコンタクトレンズを外してからご使用ください。
事故やトラブルの原因となります。(フェイシャルの場合)
- ⑨本機器をご使用の際は、必ず貴金属類(時計・指輪・ネックレス等のアクセサリー類)は全て外してください。
- ⑩他の製品の部品や付属品などを流用しないでください。事故やトラブルの原因になります。

使用中のご注意

取扱説明書に記載のある本体操作方法に従い、正しくご使用ください。
また、トリートメント手順に明記されている注意事項も必ずお守りください。



⚠ 警告

- ① 身体に異常があらわれたり、皮膚に異常を感じたりした場合は直ちに使用を中止し医師にご相談ください。
- ② 強い刺激を過度に感じた場合は使用を中止し、ご購入店または代理店にお問い合わせください。
- ③ 地震や雷の時は、ACアダプター(充電中の場合)をコンセントから抜いてください。

⚠ 注意

- ① 本機器に異常が見られたら、直ちに使用を中止してご購入店または代理店へお問い合わせください。
- ② 本機器を直接他の電気製品(テレビ・ラジオ・パソコン・携帯電話・ステレオ・他の美容機器など)に接触させないでください。
- ③ 使用中、本機器を移動する際は落とさないように注意してください。
- ④ 本機器を使用中は、周辺機器に影響を及ぼす可能性がございますので他の電子機器の側での使用は、お避けください。(例:携帯電話等)
- ⑤ 本機器をご使用の際は、専用水(PERFECT MISS AQUA HEALING)をご使用ください。

使用後のご注意

⚠ 注意

使用後のブレードは精製水を含んだコットンやティッシュでキレイに拭き取り、キャップを閉め、安全な場所で保管してください。

保守・点検のご注意

⚠ 警告

- ①本機器を勝手に分解・修理・改造しないでください。
故障かなと思われたら、使用を中止し、ご購入店または代理店へお問い合わせください。
- ②本機器を高い所から落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
誤って落とした場合は、必ず点検をしてからご使用ください。
(LEDの点灯状態・亀裂の有無等)



⚠ 注意

- ①温度や湿度の高い所、ほこりが多い所での保管はしないでください。
- ②お子様の手の届かない所、水のかからない所に保管してください。
- ③強い磁気や電波の発生する場所での保管はしないでください。
- ④ACアダプターを傷つけたり、無理に曲げたり、強く引っ張ったり、束ねたりしないでください。
また、重いものを乗せたり、挟み込んだりするとコードが破損し、火災・感電・事故の原因となります。
- ⑤本体は、水分を含ませ固く絞った柔らかい布で汚れを拭き取ってください。
固い布で拭くと本体を傷つけ機能を著しく低下させる原因となりますので、絶対にお避けください。本体はシンナー・ガソリン・灯油・磨き粉・熱湯・薬品類で拭かないでください。

点検をしましょう

- 半年以上使用しなかった本機器を再度、使用する際は、使用前に必ず異常がないかを点検してからご使用ください。(LEDの点灯状態・亀裂の有無等)
故障したままで使用になりますと事故の原因となります。

各部の名称・仕様・本体セット内容・本体操作方法

各部の名称



本体セット内容

・本体 ・ACアダプター ・充電器スタンド ・取扱説明書兼保証書

製品仕様

製品名	Dr.Fresco Fion(ドクターフレスコ フィオン)
電源定格	入力AC 100V-240V 50Hz/60Hz 出力DC 5V・1.0A
消費電力	最大2.22W
出力周波数	30kHz
LED波長	415nm(±10nm)
外形	最大(W)52mm/(D)27mm/(H)182mm
本体重量	約104g
定価	54,780円(税込)

本体操作方法




・スイッチを押すと電源が入り、青色LEDが点灯します。
『ON』の状態です。

使用方法

- 1.電源スイッチを1度押すとスキนครીナーモードが作動します。
- 2.電源スイッチをもう1度押すと超音波イオンパルスモードが作動します。
- 3.電源スイッチをもう1度押すと電源がOFFになります。

トリートメント方法

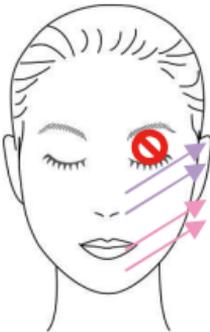①	②	③
		
<p>アゴ先から口横 ↓ フェイスラインから目の下</p> <p>下から上に 動かしてください。</p>	<p>口横から耳前 ↓ 鼻横から耳前</p> <p>内側からフェイスライン (耳側)に動かして ください。</p>	<p>眉毛から眉間 眉間から生え際 下から上に動かして ください。</p> <p>鼻・鼻筋から上に 向かって 動かしてください。</p>

■ポイント

- ①斜め45度くらいの角度で矢印の方向へ移動させます。
(2回程、繰り返します。)
- ②優しくなでるようなイメージで、止まらず動かしてください。
※肌**に**強く押しつけたり、圧力をかけないでください。

◀Dr.Fresco Fion▶

1. 本体が十分に充電してあるかをご確認ください。
(充電されていない場合は、充電完了後にご使用ください)
2. 貴金属類(時計・指輪・ピアス・ネックレス等のアクセサリー類)を外してください。
3. クレンジング・洗顔を行い、清潔な状態にしてください。


4. トリートメント

- ①トリートメント部位に専用水(PERFECT MISS AQUA HEALING)を塗布します。
- ②本体を充電器スタンドから取り外します。※充電式のため、取り外してのご使用となります。
- ③トリートメントを行います。


※必ずお肌か常に専用水(PERFECT MISS AQUA HEALING)で濡れた状態で行ってください。

※電源を入れ5分が経過しますと自動的に電源が切れます。

スキングリナーモード

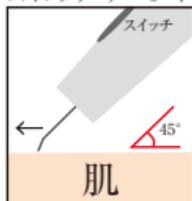

超音波イオンバルスモード

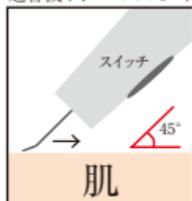

PERFECT MISS AQUA HEALING

“特許取得”の独自製法で、更に進化した透明感を…



洗浄

電気分解された高濃度ナノ化アルカリ電解水(-)です。“特許取得”の独自製法で開発された107倍もの浸透力で、毛穴の奥に詰まった皮脂(+)を強力に引き合わせ、汚れを優しく取り除きます。肌表面や毛穴に詰まった汚れを除去することで透明感を高め、次に使うアイテムが浸透しやすいやわらかな肌へ整えます。

保湿・メラニンダイエット

保湿力の高い「シルクパウダー」を配合。瞬時に肌の内側をたっぷりの潤いで満たし、お肌と髪のパサつきを整えます。同時にメラニンダイエットという新理論をもつ「プルーン分解酵素」が内側から白く輝くような美しさを引き出します。

癒し

ほんのり香る最高級ダマスクローズの気品溢れる香りで、心も肌も安らぐ贅沢なひと時を是非ご体感下さい。

150mL 5,280円(税込)
300mL 9,900円(税込)

使用上の注意

- ・お肌に合わない時や異常が見られる場合は、直ちに使用を中止してください。そのままご使用を続けると、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医にご相談されることをおすすめします。
- ・目に入らないように注意し、万が一、目に入ったときは直ちに流水で洗い流してください。
- ・直射日光を避け、高温・多湿にならない場所で保管してください。

リチウムイオン電池のリサイクルについて

リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
本製品にはリチウムイオン電池が内蔵されているため、
一般のゴミとして廃棄することができません。

本製品が不要になりましたら、分解せず宅配便等の
配達記録が残る方法にて、弊社カスタマーセンターまで
ご送付ください。弊社が責任を持ってリサイクルいたします。



◆送付時のご注意

- 送料はお客様のご負担となります。着払いでご送付いただいてもお受け取りできません。
- 他社製品、および小型充電式電池に該当しないもの(乾電池・ボタン型電池など)は回収対象外です。
- 本体以外の同梱品(ACアダプターなど)は回収対象外です。
- 回収対象外品が混入していた場合はお受け取りできません。その際は、お客様のご負担にてご返送させていただきます。
- 回収品のお引き渡し(宅配業者が回収品を受領した時、または郵便物として集荷されたときを含みます)により、回収品の所有権は弊社に移転するものとします。また、回収品のお渡し後における回収中止、回収品の返却には応じられません。

保証規定

この度は弊社製品をご購入頂きまして、誠にありがとうございます。

保証書は取扱説明書の記載内容で、無償修理を行うことをお約束するものです。万が一、ご購入日から保証期間中に故障が発生した場合は、本保証書のコピーを添付の上、ご購入店舗または弊社カスタマーセンターに修理をご依頼ください。シリアルNo、ご購入日、ご購入店または代理店の記載がない場合は、保証書は有効とはなりませんので、記入漏れの無い事を事前に必ずご確認ください。付属品(ACアダプター・充電スタンド)は保証対象外になります。保証書のNoシールを剥がされた場合は、保証対象外となりますのでご注意ください。

◆保証期間内でも次の場合は有償修理となります。

- A. 本保証書にご購入店舗名の記載がない場合
- B. 使用者側での輸送、移動時の落下等、お取扱いが不適切のために生じた故障・損傷の場合
- C. 使用者側での本製品使用中等に落下・水没・操作等によるお取扱いが不適切のために生じた故障・損傷の場合
- D. 火災・天災・異常電圧による故障・損傷の場合
- E. 接続している他の機器に起因して、本製品に故障を生じた場合
- F. 製造メーカー以外で修理・調整・改良された場合
- G. 本保証書をご提示されない場合
- H. 本保証書所定事項の未記入あるいは字句を訂正された場合
- I. シリアルNoシールを剥がされた場合

◆この保証書は国内で使用される場合にのみ有効です。

◆送料について

- a. 保証期間内の送料は往復とも弊社の負担とさせていただきます。
- b. 保証期間外の送料は往復ともお客様の負担とさせていただきます。

本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

保証書

要保管

※修理の際は必ずコピーを1部添えてください。

商品名	Dr.Fresco Fion (ドクターフレスコ フィオン)
シリアル No	
保証期間	ご購入日から 本体のみ 1 年間 (その他付属品は対象外)
ご購入店	
ご購入日	見本日
お客様名	
ご住所	〒 -
電話番号	() -

*機器や消耗品についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

カスタマーセンター

株式会社 ARTISTIC & Co.

 0120-656-959

受付時間:10:00~17:00 (土曜・日曜・祝日を除く)

・使い方がよく分からない ・部品が破損し、部品を取り替えたい ・本体が動かない
・消耗品を購入したい ・本体を修理したい

保証書は取扱説明書の記載内容で、無償修理を行うことをお約束するものです。ご購入日から上記期間中に故障が発生した場合は、本保証書のコピーを添付の上、ご購入店舗または弊社カスタマーセンターに修理をご依頼ください。

※シリアルNo、ご購入日・ご購入店の記載がない場合は、本保証書は有効とはなりませんので、記入漏れの無いことを必ずご確認ください。

※保証書のシリアルNoシールを剥がされた場合は、保証対象外となりますのでご注意ください。

製造元 株式会社 ARTISTIC & Co.

〒501-6238 岐阜県羽島市江吉良町江中4丁目21番地 B one

TEL:058-397-0309

DF210603