

保証書付

要保管

## 取扱説明書

# Zens III



※ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、大切に保管してください。

# 目次

- 取扱説明書に関するご注意 ..... p. 2
- 正しく安全にご使用いただくために ..... p. 2~3
- 使用前のご注意 ..... p. 4
- 使用中のご注意 ..... p. 5
- 保守・点検のご注意 ..... p. 6
- 各部の名称 ..... p. 7
- 機能の説明 ..... p. 8
- 操作方法
  - 1. 基本操作 ..... p. 9
  - 2. 専用アプリとの接続 ..... p. 10
  - 3. セッティング ..... p. 11~12
  - 4. LED ..... p. 13
  - 5. トリートメント ..... p. 14
- トリートメント手順
  - 1. 基本の流れ ..... p. 15
  - 2. Face ..... p. 16~17
  - 3. Body ..... p. 18~19
- 製品仕様 ..... p. 20
- 保証規定 ..... p. 21
- MEMO ..... p. 22
- 保証書 ..... 裏表紙


## 取扱説明書に関するご注意

- この度は弊社商品をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。  
取扱説明書は本機器を安全にお使いいただくために必要です。本機器を人に貸したり、差し上げる時には必ずこの取扱説明書を一緒にお渡してください。
- この取扱説明書には保証書がついています。  
「ご購入日・ご購入店舗」などの記入を必ず確かめ、大切に保管してください。


## 正しく安全にご使用いただくために

**ご使用の前に必ず本紙をお読みになり、正しくご使用ください。**

お客様や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下のような表示をしています。警告サインの表示と意味は次のようになっています。

 **危険** 「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。

 **警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

 **注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害※が発生するおそれがある内容」です。  
※家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

### ■図記号



してはいけない「禁止」を示しています。  
※図の中や近傍に具体的な内容が書かれています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。

# 正しく安全にご使用いただくために

## ⚠ 警告

### 事故や体調不良などを防ぐために

■ 次のような医用電子機器を装着している人は、本機器を使用しないでください。

医用電子機器の誤作動は、事故や体調不良の原因となります。

- ペースメーカーなどの体内植込型医用電子機器
- 人工心肺などの生命維持用電子機器
- 心電計や点滴器などの装着型の医用電子機器



禁止

■ 以下の人は使用しないでください

- 心臓疾患・血圧異常時・悪性腫瘍
- 発熱を伴う疾患・感染症疾患・急性疾患
- 歯の治療中
- エイズなどの免疫性疾患による免疫力の低下、または免疫抑制剤を使用している人
- 血友病疾患・出血性疾患・糖尿病・顔面神経痛
- 知覚・痛覚異常のある人
- ケロイド体質・顔面黒皮症・光過敏症・色素異常
- ステロイドホルモン剤の長期使用や、肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人
- アレルギー体質・アトピー性皮膚炎・皮膚病・敏感肌または肌の弱い人
- てんかんの既往のある人・光の点滅で気分が悪くなる人
- 交通事故などによる頭部及び眼科の後遺症のある人
- 目の手術を行った人（レーシックの場合、医師にご相談の上ご使用ください）
- 妊娠中・生理中・授乳中
- 幼児・自分で意思表示のできない人
- 酒気帯び・二日酔いの人
- 眠気を誘う薬を服用中の人
- 疲労の激しい人・体調のすぐれない人
- 化学繊維でシミ・かぶれなどの肌トラブルのあった人
- 化粧品による皮膚炎を起こしている人・起こした人
- エステなどでケミカルピーリングをした直後の人
- 美容機器の使用後に肌トラブルのあった人



禁止

■ 以下の部位には使用しないでください

- 指定された部位以外
- 心臓周辺・眼球及び上まぶた・唇や口の中など粘膜の部位
- 陰部・肛門・のどぼとけ周辺・耳
- 病的なシミ・ホクロ・ウィルス性のイボのある部位
- 過度の日焼けで肌がヒリヒリし、炎症を起こしている部位
- 傷口・湿疹・乾癬・ヘルペス・化膿したニキビ・吹き出物のある部位
- 痒みや火照り、物理的的刺激などによる病的なシミのある部位
- 手術した部位
- 脱毛や剃毛処理をした直後の部位



禁止

※通院中の方は医師にご相談の上、ご使用ください。

# 使用前のご注意

## ⚠ 警告

- 他の美容機器とは同時に使用しないでください。
- 美容目的以外の使用や、破損・故障した状態で使用しないでください。本機器は美容専門のトリートメント機器です。治療目的など、用途以外に使用しないでください。
- LED光を覗いたり、直視をしないでください。
- 同じ部位への連続使用はしないでください。肌を傷つけたり、感染症・炎症・出血・色素沈着などのトラブルや症状悪化の恐れがあります。
- アルコール成分が含まれている美容液を使用しないでください。肌トラブルになる恐れがあります。
- ペットには使用しないでください。
- 引火性のものの近くで使用しないでください。  
※シンナー・ベンジン・除光液・スプレーなど
- 専用ACアダプター以外で使用しないでください。専用ACアダプターを他の機器に接続しないでください。(火災・感電・故障の原因)
- ケーブルを傷めないでください。  
※傷つける・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・重い物を載せる・挟み込むなど(火災・感電・故障の原因)
- たこ足配線をしないでください。(発熱・火災の原因)



禁止



水場使用禁止



水ぬれ禁止



ぬれ手禁止



プラグを抜く



必ず守る

- 浴室や湿気の多い場所で使用・保管しないでください。
- 水のかかりやすい場所(洗面台の上など)に置かないでください。

- 水に浸けたり、かけたり、こぼしたりしないでください。(感電・火災・故障の原因)

- 濡れた手で触らないでください。(感電・けがの原因)

- ACアダプターを抜き差しする時は、必ず先端のプラグを持って抜き差ししてください。ケーブルを持って抜き差ししないでください。
- ACアダプターが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるい時は使用しないでください。

- 必ず家庭用コンセントで使用してください。
- ACアダプターやプラグは、根元まで確実に差し込んでください。
- 取扱説明書の内容を必ずお守りください。守らずに使用されると、何らかのトラブルが発生する恐れがあります。

# 使用中のご注意

## ⚠ 警告



プラグを抜く

- 次の場合は使用を中止し、電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
  - ・地震・雷
  - ・本体やアダプター・コードからの発煙・異常発熱・異臭・変形



禁止

- 使用中、本機器が熱を帯びることがありますが、安全性に問題はありません。
- 本機器を金属や電化製品に接触させないでください。  
※携帯電話・テレビなど



必ず守る

- 使用の際は、必ず貴金属類や眼鏡・コンタクトレンズを外してください。  
※貴金属類：ピアス・ネックレス・時計など
- 初めて使用する時や慣れるまでは、必ずレベル1から使用してください。
- ヘッドは強く押しつけず肌にあて、同一箇所へ3秒以上固定したままにしないでください。肌トラブルの原因になります。
- 目のまわりのトリートメントの際は目を閉じてご使用ください。
- 使用中に肌や身体に痛み、異常を感じたら直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。

## ⚠ 注意

**本体使用上のご注意** 以下の項目をよく読んでご使用ください。

1

- 特別なトリートメントは1部位＝週1回行ってください。
- 1週～2週目は週に2回お手入れしてください。その後の3週目からは肌の調子に合わせて週に1回程度お手入れしてください。
- 過度なお手入れはかえって肌によくありません。
- 毎日のトリートメントは1部位＝毎日または2日に1回行ってください。
- 肌の調子に合わせてご使用ください。

2

- フェイシャルトリートメントは、クレンジングや洗顔を行い、化粧や皮脂などの汚れを落とすうえでご使用ください。
- ボディトリートメントは、入浴後などの清潔な肌の状態でご使用ください。

3

- 肌の状態は、体調によっても異なります。
- 肌の様子を見ながら使用し、発疹・発赤・かゆみなど肌に何らかの異常が生じた場合は、使用を中止し、専門医にご相談ください。

# 保守・点検のご注意

## ⚠ 警告



分解禁止

- 分解・改造・修理をしないでください。修理はご購入店舗または弊社カスタマーセンターにご相談ください。



プラグを抜く

- 本体を掃除するときは、ACアダプターを本体とコンセントから抜いてください。(火災・故障の原因)
- 使用しないときは必ず電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください。(火災・故障の原因)



禁止

- ACアダプターやプラグピンにほこりを付着させないでください。(火災・感電・故障の原因)
- 落としたり、ぶついたりしないでください。
- 収納時にコードをアダプターに巻きつけないでください。
- お子様の手の届く場所に保管したり、使用させないでください。
- 次のような場所に保管しないでください。
  - ・直射日光が当たる場所・湿気が多い場所・粉塵が多い場所
  - ・高温または氷点下になる場所・炎天下の自動車内など
  - ・引火の危険がある場所・風雨にさらされる場所
  - ・化学薬品やガスが発生する場所・振動が激しい場所
  - ・暖房器具や熱が発生する器具の近く・磁石の近く



必ず守る

- お掃除の仕方  
水分を含ませ、固く絞ったやわらかい布で拭き取ってください。硬い布で拭くと傷ついたり、機能が低下する原因となります。  
※アルカリ剤・アルコール・シンナー・ベンジンなどの溶剤や除光液・磨き粉・熱湯・薬品類は使用しないでください。  
※美容液やジェルが付着した状態で放置しないでください。

## 点検をしましょう

半年以上使用しなかった本機器を再度使用する際には、使用前に必ず異常がないかを点検してからご使用ください。(LEDの点灯状態・亀裂の有無など)  
故障したままでご使用になりますと事故の原因となります。

# 各部の名称

## 本体



## 付属品

- ACアダプター
- スタンド
- 取扱説明書兼保証書

## 24KEp素子

■ 肌との親和性が最も高いとされている、24金で表面加工を施しました。

※とても柔らかい金属であるため、傷がつきやすくなっています。お取り扱いの際は十分にご注意ください。細かい擦り傷程度であれば品質に問題ございません。




# 機能の説明



## ■ Special Care (スペシャルケア)

「TP」、「HP」に加えて、じんわりと温める高周波を同時に出力できるモードです。心地よい刺激と温め効果を追求したホームケア最高峰のトリートメントモードです。

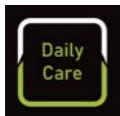

## ■ Daily Care (デイリーケア)

温めと筋肉運動を同時に行うことで、EMSの効率を高めることができるモードです。



## ■ DF (ディオ・フリークエンシー)

違う2種類の高周波を使用し、肌の表面だけでなく広範囲まで温め、ハリのあるお肌をさらに実感できるモードです。



## ■ TP (タッピングパルス)

独自技術により、断続的にパルスを出力することでエステティシャンのタッピングのような心地よい刺激を実現しました。あらゆる肌の悩みに対して一度にケアすることができます。



## ■ HP (ハンドプレスパルス)


インサートパルス\*、EMS(筋肉運動)、温め(中・高周波)が素子から同時に出力されます。

※インサートパルスは一切痛みのない電気パルスを与えることにより、お肌に塗布したエッセンスの美容液成分を補給し、その効果を最大限に活かします。



## ■ LED

光の波長で肌悩みに合わせてサポートします。

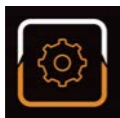

## ■ セッティング

音量・言語の設定、ヘルプ・デバイス情報の確認ができます。

# 操作方法 1. 基本操作

## ディスプレイ



### Bluetooth


接続時: ブラウン

未接続時: 白色

タッチすると、Bluetoothの接続を開始します。

### モード

選択中のモードが表示されます。

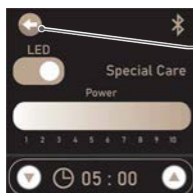

### 戻る

前の画面に戻ります。

## 電源ON/OFF

### ■ 電源ON

ACアダプターをコンセント・本体に接続します。

### ■ 電源OFF

使用後はACアダプターをコンセント・本体から抜き、電源を切ります。

## 専用アプリ

■ Bluetoothでスマートフォン専用アプリと接続することで、使用履歴・デバイス情報などを確認することができます。

※ 専用アプリと接続せずに使用することも可能です。



◀ ☒ 左のQRコードをスマートフォンのカメラで読み取り、専用アプリをダウンロードします。

ダウンロード後は専用アプリの指示に従い、情報の登録を行います。



## 操作方法 2. 専用アプリとの接続

■ 電源をONにした後、ZeusIII本体とスマートフォン専用アプリを接続します。  
それぞれ並行して操作を行ってください。

※ 専用アプリと接続せずを使用する場合、使用履歴は残りません。

### ▼ ZeusIII ディスプレイ



① Bluetoothアイコンをタッチします。



② 画面をタッチします。



### ▼ スマートフォン専用アプリ画面



① 専用アプリを起動します。



② 「BEAUTY DEVICEを接続してください。」  
をタッチします。



③ 「ACG\_ZeusIII」をタッチします。



④ それぞれで完了画面が表示されると、本体と専用アプリの接続が完了です。


※ 初回の接続時はスマートフォンの完了画面をタッチし、専用アプリの指示に従ってデバイス登録を行ってください。

## 操作方法 3. セッティング



- ① モード選択画面から画面を左右にスワイプして〈セッティング〉を選択し、アイコンをタッチします。

### 音量設定

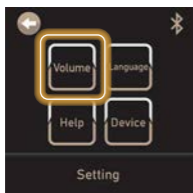


- ① 〈Volume〉をタッチします。



- ② ディスプレイのスライドバーで調節します。

### ヘルプ

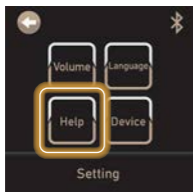

- ① 〈Help〉をタッチします。  
お問い合わせ先が確認できます。  
ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

## 操作方法 3. セッティング

### 言語設定




① <Language>をタッチします。



② 表示する言語をタッチします。

### デバイス

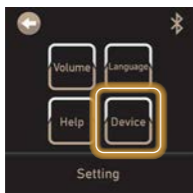


① <Device>をタッチします。  
シリアルNo.など機器情報の確認ができます。

## 操作方法 4. LED



- ① モード選択画面から画面を横にスワイプして〈LED〉を選択し、アイコンをタッチします。

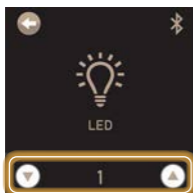

- ② ▲/▼をタッチしてLEDのモードを選択します。  
※ LEDのみで使用することも可能です。

Mode 1  
3色点灯



Mode 2  
赤・青色点灯



Mode 3  
緑・青色点灯



Mode 4  
3色点滅




- 赤色 …………… ツヤのある弾力肌へと導きます。
- 緑色 …………… 透明感のある印象的な肌へと導きます。
- 青色 …………… 健やかな肌へと導きます。
- 3色点灯 …………… ささまざまな肌悩みに。
- 3色点滅 …………… トリートメントの仕上げに。


※ 点灯中、光を覗いたり直視をしないでください。

※ 目の周りのトリートメントの際は目を閉じてご使用ください。

## 操作方法 5. トリートメント

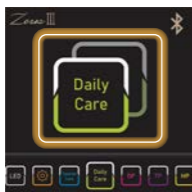

- ① モード選択画面から画面を横にスワイプして Special Care / Daily Care / DF / TP / HP から使用するモードを選択し、アイコンをタッチします。

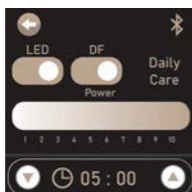

- ② パワー・タイマーなどの設定をします。

■ LED・DF (Daily Careのみ)

- タッチしてON/OFFを選択します。



※ LEDのモードはLED設定画面で選択します。(p.13)

■ パワー

- ディスプレイ下のUP/DOWNボタンで選択します。

※ パワーは10段階あります。

※ 初めて使用される際は、パワー1から開始し、心地いいと感じる強さで使用してください。

■ タイマー

- ▲/▼をタッチしてタイマーを選択します。

※ 1～10分で選択できます。



- ③ スタート/ストップボタンを押すことで、選択中のモードがスタートします。

※ 1分に1回音が鳴ります。

※ 使用中はディスプレイ操作ができなくなります。設定を変更する際は、1度ストップしてから操作してください。

- ④ スタート/ストップボタンを押すことで、選択中のモードがストップします。


※ タイマーで設定した時間が経過すると、自動停止します。(停止前に音が鳴ります。)

# トリートメント手順 1. 基本の流れ

## トリートメント前

- ① ネックレス、指輪などのアクセサリーや、身につけているすべての貴金属類を外してください。
- ② フェイシャルトリートメントは、通常のクレンジングや洗顔を行い、化粧や皮脂などの汚れを落とすうえでご使用ください。  
ボディトリートメントは、入浴後などの清潔な状態でご使用ください。

## トリートメント

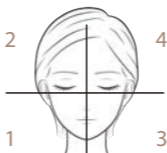

- 全顔のトリートメントをする際は、一度に美容液やジェルを塗布するのではなく、上のイラストのように4つのエリアに分けて塗布し、トリートメントを行ってください。

### 毎日のトリートメント

- 《 Daily Care 》 = 10分間
  - トリートメント部位にジェルを塗布し、トリートメントを行ってください。
- ※ トリートメント手順について詳しくはp.16をご覧ください。

### 特別な週1回のトリートメント

- 《 Special Care 》 or 《 DF 》 or 《 TP + HP 》 = 10分間
- ※ 週に1度、いずれかのトリートメントを行ってください。
  - Special Care / TP / HP : トリートメント部位に美容液を塗布し、トリートメントを行ってください。
  - DF : トリートメント部位にジェルを塗布し、トリートメントを行ってください。
- ※ TP+HPの際は、まずはTPモードで5分間、続けてHPモードで5分間のトリートメントが効果的です。
- ※ トリートメント手順について詳しくはp.17をご覧ください。

## トリートメント後


- ① トリートメント後、肌に残った美容液はやさしくなじませ、ジェルは拭き取ってください。
- ② トリートメントが終了したら、水分を含ませた柔らかい布やティッシュなどで本体の汚れを拭き取り、その後乾いたティッシュで水分を拭き取ってください。



## トリートメント手順 2. Face

### Daily Care

- トリートメント部位にジェルを塗布し、トリートメントを行ってください。
- イラストの●の位置で約3秒ずつ順番に肌にヘッドをあててください。
- ①～⑤の手順はそれぞれ2～3回ずつ行ってください。

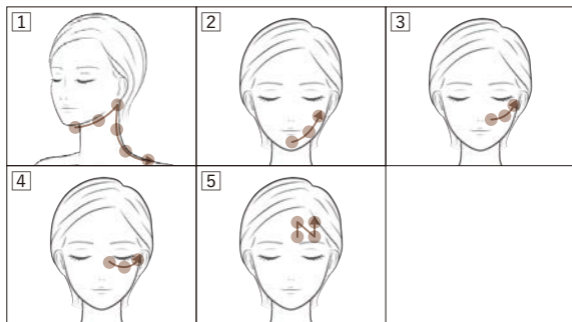

- ※ イラストのトリートメント手順は目安となります。
- ※ トリートメントの途中で乾きを感じたら、ジェルを付け足してください。  
塗布量が少なすぎると肌に刺激を感じたり、トリートメントの効果が発揮されない場合があります。
- ※ トリートメントを行う部分へ素子をすべて肌に密着させてください。
- ※ 使用中、ヘッドの表面に汚れなどが付着してざらつく場合は、柔らかい布やティッシュなどで拭き取ってください。
- ※ 体調が悪い場合には、使用しないでください。
- ※ 過度なトリートメントは肌の負担となります。1日に何度も使用しないでください。


### ⚠ 警告

粘膜や上まぶた、眼球や耳のまわり、のどぼとけ周辺には使用しないでください。

## トリートメント手順 2. Face

### Special Care / DF / TP / HP

- トリートメント部位に美容液やジェルを塗布し、トリートメントを行ってください。
- ゆっくりと常に動かし、同一箇所には3秒以上固定したままにしないでください。
- ①～③の手順はそれぞれ2～3回ずつ行ってください。

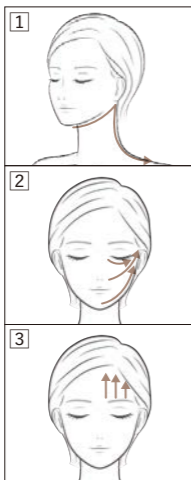

顎下からフェイスラインを通り、耳後ろまで動かします。  
その後耳下腺を通り、肩まで動かします。

額先からフェイスラインを通り、こめかみまで動かします。  
次に小鼻から頬を通り、こめかみまで動かします。  
最後に目頭から目の下を通り、こめかみまで動かします。

眉毛から髪の生え際まで引き上げるように、下から上へ動かします。

- ※ イラストのトリートメント手順は目安となります。
- ※ トリートメントの途中で乾きを感じたら、美容液やジェルを付け足してください。  
塗布量が少なすぎると肌に刺激を感じたり、トリートメントの効果が発揮されない場合があります。
- ※ トリートメントを行う部分へ素子をすべて肌に密着させてください。
- ※ 使用中、ヘッドの表面に汚れなどが付着してざらつく場合は、柔らかい布やティッシュなどで拭き取ってください。
- ※ 体調が悪い場合には、使用しないでください。


### ⚠ 警告

粘膜や上まぶた、眼球や耳のまわり、のどぼとけ周辺には使用しないでください。

# トリートメント手順 3. Body

## 二の腕


- 特別なトリートメント:片腕15分
- 毎日のトリートメント:片腕15分

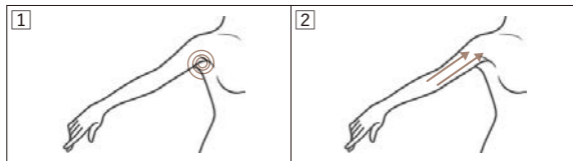

- ① 腕の付け根をクルクルと動かし2~3周します。
- ② 肘の上から二の腕を通り、直線で腕の付け根あたりまで移動します。

## ウエスト

- 特別なトリートメント:15分
- 毎日のトリートメント:15分

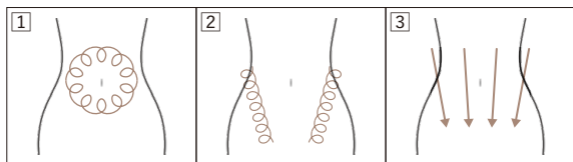

- ① おへその周りをクルクルと動かしながら1周します。
- ② ウエストの横からクルクルと動かしながらくびれを作るようなイメージで、ソケイリンパまで移動します。
- ③ 上から下へ流すようなイメージで直線で移動します。

## ヒップ

- 特別なトリートメント:15分
- 毎日のトリートメント:15分




- ① ヒップラインと太ももの境目からクルクルと動かしながらか、腰の下あたりまで移動します。
- ② ヒップラインと太ももの境目をギザギザと動かしながらか移動します。
- ③ ヒップラインと太ももの境目から直線で、腰の下あたりまで移動します。

# トリートメント手順 3. Body

## 足(表・裏)


■ 特別なトリートメント:片足15分 ■ 毎日のトリートメント:片足15分

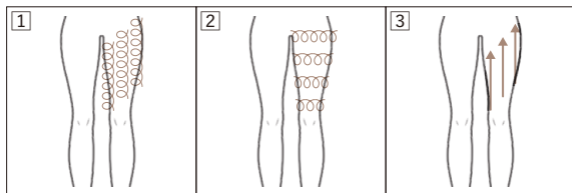

- ① 膝上(膝裏)から太ももの付け根(ヒップライン)までクルクルと動かしながら下から上に移動します。
  - ② 膝上(膝裏)から太ももの付け根(ヒップライン)までクルクルと左右に動かしながら下から上に移動します。
  - ③ 膝上(膝裏)から太ももの付け根(ヒップライン)まで直線で下から上に移動します。
- ※ 表と裏は同じような動かし方で行ってください。

## ふくらはぎ

■ 特別なトリートメント:片足15分 ■ 毎日のトリートメント:片足15分

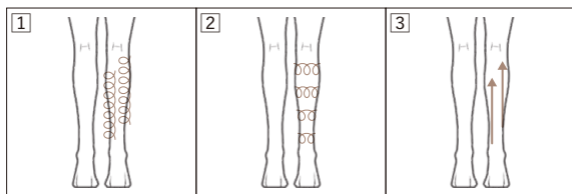

- ① 足首あたりから膝裏までクルクルと動かしながら下から上に移動します。
- ② 足首あたりから膝裏までクルクルと左右に動かしながら下から上に移動します。
- ③ 足首あたりから膝裏まで直線で下から上に移動します。

## 製品仕様

商品名	ZeusIII (ゼウス スリー)
ACアダプター定格電源	入力 100-240V ~ 50/60Hz 出力 12V = 3.0A
本体定格電源	入力 12V = 3.0A
消費電力	最大20W
外形寸法	本体:約 H205 × W60 × D66mm
質量	本体:約 186g

# 保証規定

■ 保証書は取扱説明書の記載内容で、無償修理を行うことをお約束するものです。万が一、ご購入日から保証期間中に故障が発生した際は、本保証書のコピーを添付の上、ご購入店舗または弊社カスタマーセンターに修理をご依頼ください。

- ※ シリアルNo.・ご購入店舗・ご購入日・お客様名・ご住所・お電話番号の記載がない場合、保証書は有効となりませんので、記入漏れの無い事を事前に必ずご確認ください。
- ※ 付属品(ACアダプター・スタンド・取扱説明書兼保証書)は保証対象外となります。
- ※ 保証書のシリアルNo.シールを剥がされた場合は、保証対象外となりますのでご注意ください。

■ 保証期間内でも次の場合は有償修理とさせていただきます。

- A. 保証書のシリアルNo.シールを剥がされた場合
- B. 本保証書にシリアルNo.・ご購入店舗・ご購入日・お客様名・ご住所・お電話番号の記載がない場合
- C. 使用者側での輸送・移動時などの落下・水没などによりお取り扱いが不適切なために生じた損傷や故障の場合
- D. 火災・天災・異常電圧により損傷・故障した場合
- E. 接続している他の機器に起因して、本製品が故障した場合
- F. 本製品付属の専用ACアダプター以外を使用し故障した場合
- G. 弊社以外で修理・調整・改造をした場合
- H. 本保証書のご提示がない場合
- I. 弊社推奨の専用美容液以外を使用し美容液が原因で故障した場合

■ この保証書は国内で使用される場合にのみ有効です。

- ※ 海外で購入された際は、製造メーカーより発行された正規代理店証明書がある場合のみ保証対象内です。

■ 送料について

- a. 保証期間内の送料は往復とも弊社負担とさせていただきます。(日本国内のみ有効)
- b. 保証期間外の送料は往復ともお客様負担とさせていただきます。

■ 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

# MEMO

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# 保証書

※修理の際は必ずコピーを1部添えてください。

要保管

商品名	ZeusIII (ゼウス スリー)
シリアルNo.	
保証期間	ご購入日から <b>本体のみ1年間</b> (その他付属品は対象外)
ご購入店舗	
ご購入日	年 月 日
お客様名	
ご住所	〒 -
お電話番号	( ) -

ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

- 使い方がよく分からない
- 部品が破損し、部品を取り替えたい
- 本体が動かない
- 消耗品を購入したい
- 本体を修理したい など

カスタマーセンター

株式会社 **A. GLOBAL**

☎ **058-325-9788**

受付時間:10:00~17:00 (土日祝日を除く)

■ 本保証書は取扱説明書の記載内容で、無償修理を行うことをお約束するものです。万が一、ご購入日から上記期間中に故障が発生した際は、本保証書のコピーを添付の上ご購入店舗または弊社カスタマーセンターに修理をご依頼ください。

※シリアルNo.・ご購入店舗・ご購入日・お客様名・ご住所・お電話番号の記載がない場合、保証書は有効となりませんので、記入漏れの無い事を事前に必ずご確認ください。

※保証書のシリアルNo.シールを剥がされた場合は、保証対象外となりますのでご注意ください。

※保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

製造販売元 株式会社 **A. GLOBAL**

〒501-6238 岐阜県羽島市江吉良町江中4丁目21番地 Bone 4F

TEL:058-325-9788